


# Inkontinenssensor

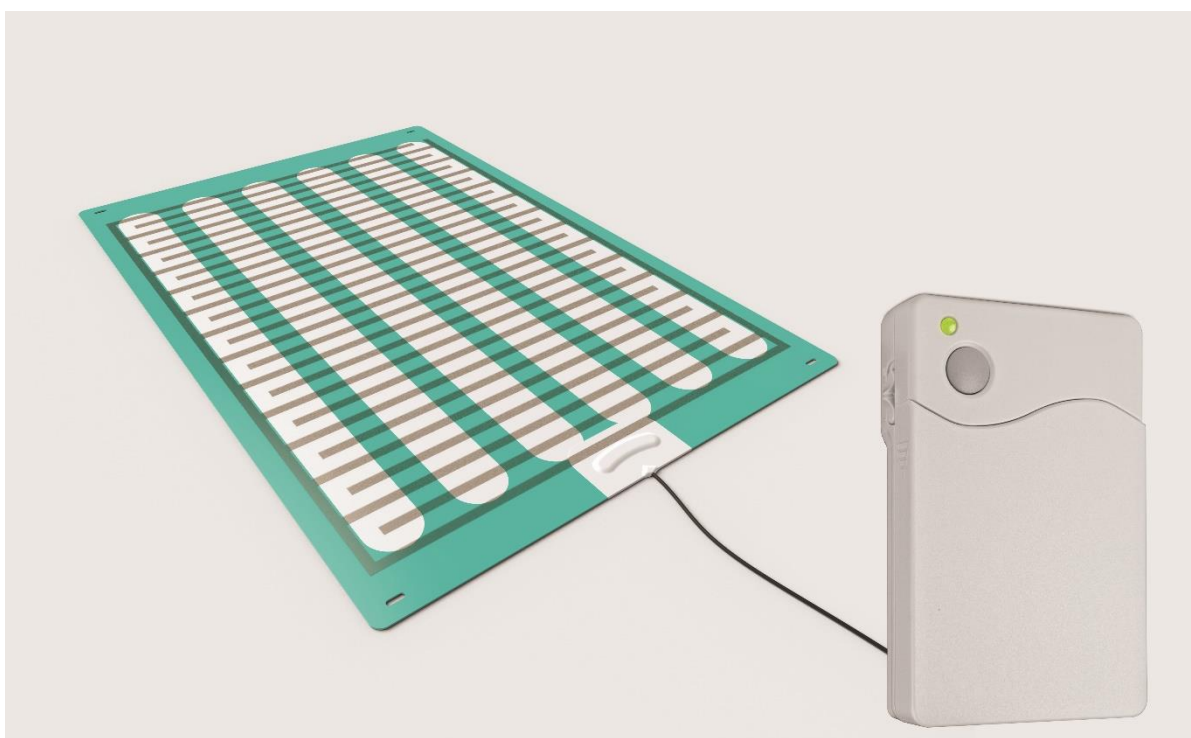

Användarhandbok

Svenska

## **Installation**

Inkontinenssensorn ansluts till mBox och larmar när fukt upptäcks.

Den ska placeras platt ovanpå madrassen med den gröna och vita sidan vänd uppåt, under lakanet men ovanpå eventuellt sängskydd, den ska placeras i höjd med höftområdet.

Om sensorn är för känslig, lägg ytterligare ett lakan ovanpå sensorn.

Se till att kabeln är instoppad på ett säkert sätt under lakan eller under madrassen för att undvika att det blir en snubbelrisk

## **Para ihop Inkontinenssensorn/mBox med ett trygghetslarm**

1. Anslut inkontinenssensorn till mBox.
2. Vrid funktionsväljaren på mBox till läge A.
3. Tryck på den gröna knappen på trygghetslarmet i cirka 4 sekunder tills ett pip hörs. (För Eliza, tryck på radioparningsknappen som finns på bakpanelen)
4. Applicera en fuktig trasa på den gröna och vita sidan på inkontinensmattan i några sekunder, en melodi kan höras från trygghetslarmet.
5. Bekräfta parningen genom att trycka på den röda knappen på Trygghetslarmet. En bekräftelsemelodi hörs från Trygghetslarmet.
6. Programmera larmtypen för mBox i i-care online.

För mer information om hur du parar trygghetslarmet med radiosändaren hänvisas du till manualen för trygghetslarmet.

## **Hur du testar larmet efter parning**

För att testa funktionen, applicera en fuktig trasa på den gröna och vita sidan på inkontinenssensorn i några sekunder. Kontrollera att larmet är mottaget på larmmottagningscentralen.

## Underhåll

- Testa sensorn regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Inkontinenssensorn bör rengöras regelbundet.
- För att rengöra, använd desinfektionsservetter eller applicera antibakteriell lösning på en fuktig trasa, var försiktig så att du inte skadar området där kabeln går in i mattan. Låt torka naturligt eller torka av med en ren, torr trasa.
- Sänk inte ner inkontinenssensorn i någon lösning.
- När inkontinenssensorn förvaras, håll den platt eller rulla inkontinenssensorn löst. Böj inte inkontinenssensorn.

## Orderinformation

- Radiosändare mBox 9200, art.nr. 300 154, krävs för att kommunicera trådlöst till Careium trygghetslarm. Inkontinenssensorn är utrustad med en RJ45-kontakt som passar direkt på mBoxen.
- Sense metallhållare, art.nr. 300 014, är designad för att enkelt montera mBox på till exempel sängramen utan behov av verktyg eller skruvar.